



FICHA TÉCNICA

+

Resguardos Para incontinência 60x60



ADASwabs



ADABandages



ADAComfort



ADACare



Índice

- 01 Descrição do produto
- 02 Classificação
- 02 Outras Características
- 02 Finalidade Prevista
- 02 Biocompatibilidade
- 03 Composição
- 04 Características Técnicas
- 04 Dimensões do Produto
- 04 Embalagem primária e secundária
- 05 Codificação do Produto
- 05 Condições de Transporte e Armazenamento

Resguardo para Incontinência 60x60

Referência do produto: 79000150606090



Resguardo ADA Comfort

Os resguardos ADA COMFORT são protetores com elevada capacidade de absorção e retenção, compostos por materiais selecionados para garantir que são hipoalergénicos. Dermatologicamente testado por laboratório externo acreditado pelo IPAC (Acreditação L0312-1), pela norma UNE EN ISO 10993-10:2013 (ensaios de irritação e sensibilização cutânea) e UNE EN ISO 10993-5:2009 (citotoxicidade in vitro % ≥ 70), sendo, portanto, dermoprotetores.


A sua elevada resistência à rutura, previne a destruição do seu núcleo absorvente de celulose, garantindo assim a absorção durante a utilização.

Canais de dispersão rápida

Tecido Hipoalergénico suave

Corpo absorvente homogéneo

Tecido externo antideslizante

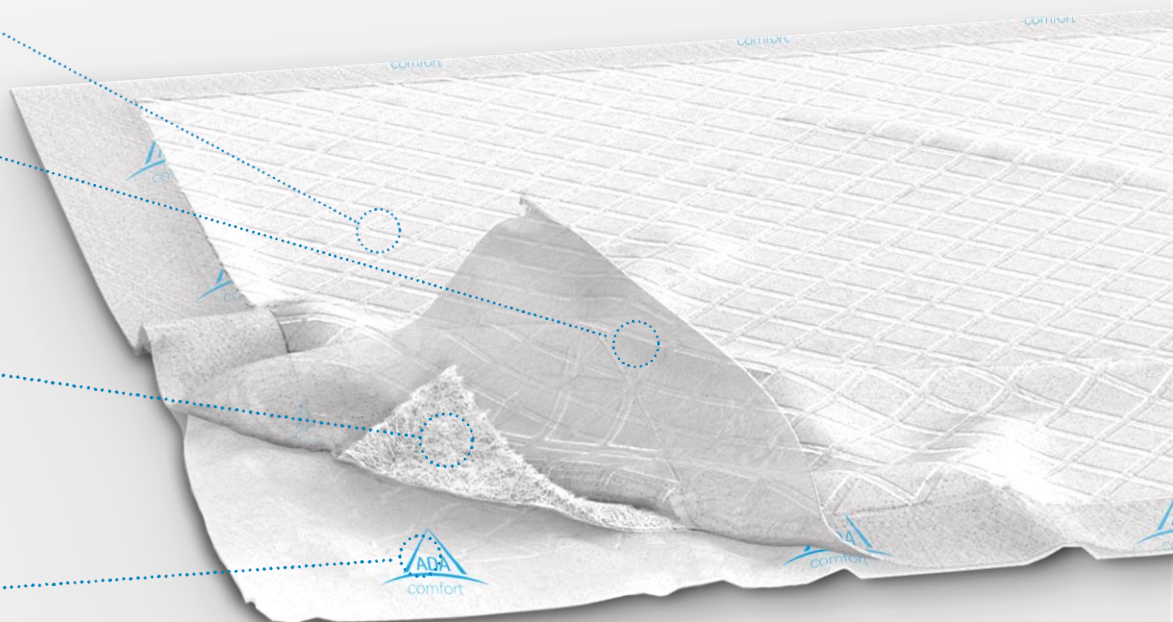

Absorventes



Hipoalergénicos



Dispersão rápida



Ajuste perfeito



Anti-deslizante

Breve descrição do produto:

- Protetor absorvente de uso único, com elevada capacidade de absorção, retenção e proteção.
- Confortável em contacto com a pele, constituído por um núcleo absorvente de celulose, distribuída de forma homogénea por todo o núcleo absorvente, revestido com tecido não tecido altamente filtrante.
- Face exterior constituída por matérias impermeáveis, selecionadas de forma a evitar reações alérgicas.
- A sua forma e estrutura (possui canais de distribuição) permitem a difusão da urina evitando desta forma encharcamentos.
- Com elevada resistência à tração tanto longitudinal como transversalmente em seco como em molhado, impossibilitando a destruição da celulose.
- As suas dimensões permitem uma adaptação perfeita tanto às camas, como às cadeiras de rodas ou outros equipamentos.
- Hipoalergénico.

Finalidade prevista:

- Destinado a todos os tipos de incontinência urinária e como complemento adicional para outros procedimentos clínicos em que seja necessário a contenção de fluidos.
- As suas dimensões permitem uma adaptação perfeita tanto às camas como a cadeiras de rodas, podendo ainda ser utilizados para outros fins.

Classificação:

- DM Classe I segundo o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e Conselho.

Outras características:

- Isento de látex, ftalatos e PVC
- Isento de qualquer tipo de componentes tóxicos
- Produto biocompatível e testado em laboratórios externos de acordo com a ISO 10993

Biocompatibilidade

Sensibilização cutânea		Não apresenta sensibilização cutânea
Irritação cutânea	EN ISO 10993	Não apresenta irritação cutânea
Citotoxicidade		Ausência de citotoxicidade

Composição:

Núcleo absorvente:

- Polpa de celulose superabsorvente com sistema neutralização de odores. Com excelente capacidade de absorção e proteção.
- Espalhamento homogêneo e uniforme da celulose por todo o núcleo absorvente do resguardo de forma a garantir uma maior distribuição e absorção de fluidos.
- Canais de distribuição de forma a garantir a rápida distribuição e absorção de fluidos evitando qualquer tipo de fugas ou encharcamentos.
- A estrutura compacta e uniformemente distribuída da celulose fazem com que o resguardo apresente uma elevada resistência à tração tanto longitudinalmente como transversalmente, em seco e em molhado, impossibilitando a destruição da celulose com os movimentos do paciente.
- A polpa de celulosa é branqueada com oxigénio sem a intervenção de componentes clorados.


Face exterior:

- Filme impermeável (filme de polietileno) que evita perdas de humidade e toda e quaisquer fugas de fluidos para o exterior.
- Com logotipo impresso que permite a distinção da face interior para o uso correto.
- Com propriedades antideslizantes de forma a posicionar corretamente o resguardo, fixando no local selecionado, evitando que o mesmo se mova. A sua utilização não provoca qualquer tipo de ruído, sendo totalmente silencioso.
- Constituída por material biocompatível apresentando impressão de lote e dimensão.

Face interior:

- Constituída por tecido não tecido (polipropileno) suave, confortável e tolerante com a pele. Com propriedades de dermoproteção de forma a evitar dermatites e úlceras de pressão em contanto com a pele. Material resistente á tração tanto em seco como em húmido, longitudinal e transversalmente.
- Material super filtrante e hidrófilo permitindo a passagem da urina e outros fluidos rapidamente para o núcleo absorvente de forma a manter a sensação de pele seca.
- Possui uma zona sem celulose que serve de barreira não absorvente para evitar fugas de fluidos.

Composição	
Face exterior	Filme de polietileno
Face interior	Tecido não tecido
Núcleo absorvente	Polpa de celulose

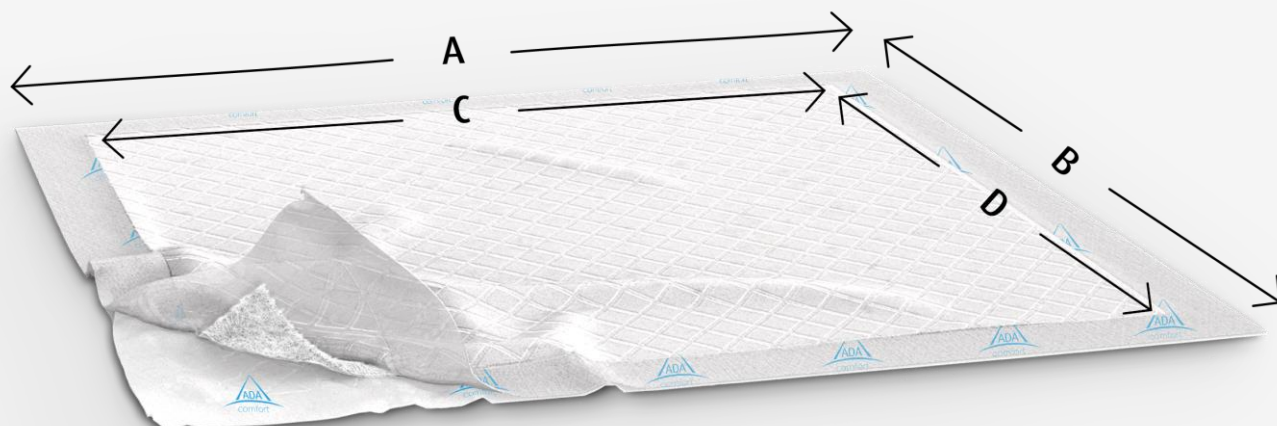

Características técnicas

Característica	Método	Requisito
A- Comprimento exterior (cm)	Metro calibrado	60
B- Largura exterior (cm)	Metro calibrado	60
C- Comprimento do núcleo absorvente (cm)	Metro calibrado	54
D- Largura do núcleo absorvente (cm)	Metro calibrado	54

Nota: Todas as determinações mencionadas apresentam uma tolerância de +/- 10%

Características de acondicionamento

Embalagem Primária e Secundária: (de acordo com o Capítulo III (23) do anexo I do regulamento 2017/745 da Comissão Europeia)

- Descrição do produto (tamanho e número de resguardos, outras características relevantes);
- Nº de lote;
- Validade;
- Referência do produto;
- Indicação do fabricante com todos os contactos do mesmo;
- Marcação CE;
- Indicação de que se trata de um dispositivo de médico de uso único;
- Indicação das condições de armazenamento;
- Código EAN;
- Código de barras GS1 (assegurando a rastreabilidade completa do produto)- embalagem secundária

- A embalagem primária e secundária utilizadas no acondicionamento e transporte do produto são produzidas por materiais recicláveis;
- A simbologia apresentada na embalagem primária e secundária está de acordo com a norma ISO 15223-1.

Codificação do produto

Produto	CDM	Referência	NPDM	UDI-DI	Código EAN	Código GS1
Resguardos para Incontinência 60x60	20537760	79000150606090	T04010201	05600216390060	5600216390060	15600216390494

Condições de transporte e armazenamento

Produto	Unidades/Embalagem	Embalagem/Caixa	Caixa/Paleta	Dimensões Paleta (cm)
Resguardos para Incontinência 60x60	30	6	32	205x80x120

- O produto deverá ser armazenado ao abrigo da humidade á temperatura ambiente;
- Recomenda-se temperaturas entre 10° e 40°C e humidade relativa entre 30 e 60%.

 Albino Dias de Andrade S.A.

 Rotunda do Complexo Desportivo, 15
4595-069 Seroa, Paços de Ferreira
Porto - PORTUGAL

 (+351) 255 890 040

 (+351) 255 890 049

 geral@ada.pt

www.ada.pt



 Albino Dias de Andrade, S.A.

 Rotunda do Complexo
Desportivo, 15 4595-069
Seroa, Paços de Ferreira
Porto-Portugal

 (+351) 255 890 040

 geral@ada.pt

